



# CentoperCento

## REF CentoperCento

È UN DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1

LIVELLO RIGIDITÀ:

Medium soft

Lato 1

NO FLIP



Molleggio in titanio a zone differenziate e topper in touch foam per il massimo rispetto delle forme del corpo.

Altezza materasso: 35 CM.

SFODERABILE.

N.B.: Nelle lavatrici domestiche entrano fodere fino a 120 cm. di larghezza.



MATERASSO ANTIACARO



TESSUTO ANALLERGICO



TOUCH FOAM



MOLLEGGIO IN TITANIO



LAVABILE 60°



### 1\_ FODERA ESTERNA

Realizzata in tessuto anallergico ad alta traspirabilità con esclusivo trattamento allo zinco, morbido al tatto e delicato sulla pelle. Sottoposto a procedimento anallergico permanente resistente a tutti i lavaggi. Il rivestimento è divisibile in due parti con cerniera perimetrale e lavabile a 60° c.

### 2\_ MOLLEGGIO

Composto da 400/800 esclusive molle insacchettate indipendenti in titanio, abbinate a uno speciale profilo perimetrale in acciaio temperato che corre lungo il materasso per un sostegno calibrato e duraturo nel tempo. L'utilizzo del titanio permette di aumentare la resistenza alle sollecitazioni nel tempo ovvero mantiene più a lungo la performance rendendo il materasso maneggevole e meno pesante del 40% rispetto a un molleggio in acciaio tradizionale.

### 3\_ STRATO MASSAGGIANTE TOP BOX

Realizzato in "espanso ecologico" ad alta densità dn 60 idrofilo e resiliente per un deciso sostegno. Assicura una perfetta distensione dorsale del corpo durante il riposo.

### 4\_ SIDER BOX

Racchiude il molleggio e viene realizzato in espanso a massima densità dn 70 a garanzia di un perfetto bilanciamento del piano di riposo. Rende il materasso robusto e portante.

### 5\_ IMBOTTITURA IN SETA E LANA ( DUE FALDE SOVRAPPOSTE)

Seta: di alto pregio, assorbe l'umidità in eccesso. Lana vergine: durevole ed elastica, dissipa l'umidità in eccesso rendendo la superficie di riposo fresca e asciutta.


### 6\_ LATO 1 : TOPPER SFODERABILE

Che esalta l'elasticità del supporto. La fodera è lavabile a 60°. L'anima in touch foam molto elastico, traspirante, idrofilo. Subisce e ritorna: non si compatta. Disperde umidità, rimane fresco e asciutto.

### 7\_ MATERASSO NO FLIP: SI UTILIZZA DA UN SOLO LATO

Si consiglia di ruotare periodicamente testa e piedi.

CORREDATO DA MANIGLIE

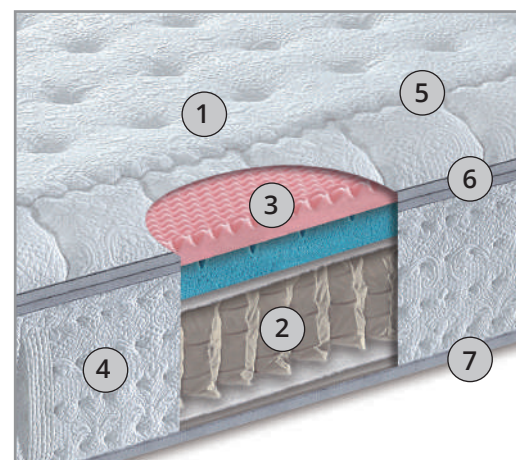

Il materasso CentoperCento si adatta al profilo ed alla posizione del corpo garantendo a collo, schiena, spalle il sostegno anatomico ideale, distribuendo la pressione in modo uniforme su tutta la superficie di contatto e materasso. Il materasso, quando sottoposto alle sollecitazioni del peso corporeo, reagisce con una spinta verso l'alto sostiene il corpo generando una adeguata pressione contraria rilassante. Inoltre, ogni parte del corpo (testa dorso, bacino, glutei, cosce, ginocchia e piedi) è sostenuta in proporzione al suo peso. Il materasso consente alla colonna vertebrale di manifestare la sua curvatura naturale garantendo il rilassamento delle fasce muscolari.

### SMALTIMENTO

I componenti del materasso possono essere correttamente conferiti in discarica oppure opportunamente riciclati.

Somaschini Lane s.r.l. - Tel. 031.76.12.41 - [www.somaschinilane.com](http://www.somaschinilane.com)

	Marchatura CE		Dispositivo Medico
	Fabbricante		Lotto
	Consultare le istruzioni per l'uso		Data di Produzione
	Tenere lontano dalla luce del sole		Conservare in luogo asciutto
	Numero di catalogo		Codice UDI