



Gemma

REF Gemma

È UN DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1

LIVELLO RIGIDITÀ:

Medium firm

Lato 1

NO FLIP



MATERASSO
ANTIACARO



TESS/IMBOTT
ANALLERGICI



TOUCH
FOAM



TESSUTO
TENCEL®



LAVABILE
60°



Topper in touch foam abbinato a un molleggio indipendente a 7 zone differenziate per un sostegno accogliente, delicato e progressivo.

Altezza materasso: 27-28 CM.

SFODERABILE.

N.B.: Nelle lavatrici domestiche entrano fodere fino a 120 cm. di larghezza.

1_ FODERA IN TENCEL 3D

In fibre di origine vegetale. Anallergico naturale perché deriva dalla cellulosa con proprietà antibatteriche e antimicotiche. Elimina l'eccesso di umidità che si forma con la sudorazione corporea, anallergico e igroscopico. La tridimensionalità del tessuto lo rende altamente traspirante. Il rivestimento è divisibile in due parti con cerniera perimetrale e lavabile a 60° c.

2_ MOLLEGGIO INDIPENDENTE

Composto da 400/800 molle insacchettate indipendenti, abbinato a uno speciale profilo perimetrale in acciaio temperato che corre lungo il materasso per un sostegno calibrato e duraturo nel tempo. 7 zone di portanza differenziata per ottimizzare l'accoglienza di qualsiasi peso corporeo. Ottenute con molle dal filo di diverso spessore a seconda della zona da coprire. Le zone differenziate sono calibrate per sostenere in modo adeguato la colonna vertebrale.

3_ STRATO MASSAGGIANTE TOP BOX

Con zone a portanza differenziata composto da una schiuma a base d'acqua e base soia con densità dn50. Abbinato a un tessuto volumetrico traspirante per garantire passaggio di aria.

4_ SIDER BOX

Racchiude il molleggio, viene realizzato in "espanso ecologico" ad alta densità per garantire uniformità al piano di riposo. Rende il materasso robusto e portante.

5_ IMBOTTITURA

In fibra anallergica traspirante ad alta grammatura.


6_ LATO 1

Topper sfoderabile e fodera lavabile a 60° c. Massello interno in touch foam molto elastico, traspirante, idrofilo. Subisce e ritorna: non si compatta. Disperde umidità, rimane fresco e asciutto.

7_ MATERASSO NO FLIP: SI UTILIZZA DA UN SOLO LATO

Si consiglia di ruotare periodicamente testa e piedi.

CORREDATO DA MANIGLIE

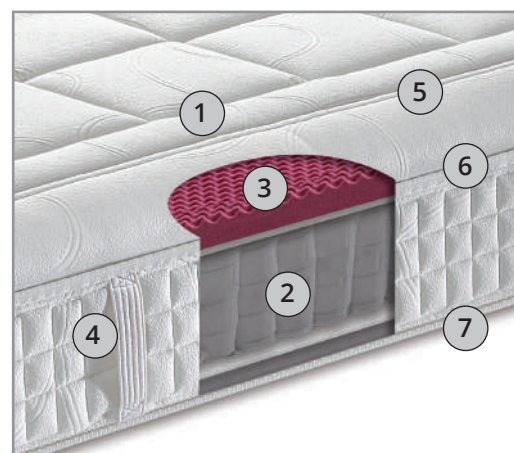

Il materasso Gemma si adatta al profilo ed alla posizione del corpo garantendo a collo, schiena, spalle il sostegno anatomico ideale, distribuendo la pressione in modo uniforme su tutta la superficie di contatto e materasso. Il materasso, quando sottoposto alle sollecitazioni del peso corporeo, reagisce con una spinta verso l'alto sostiene il corpo generando una adeguata pressione contraria rilassante. Inoltre, ogni parte del corpo (testa dorso, bacino, glutei, cosce, ginocchia e piedi) è sostenuta in proporzione al suo peso. Il materasso consente alla colonna vertebrale di manifestare la sua curvatura naturale garantendo il rilassamento delle fasce muscolari.

SMALTIMENTO

I componenti del materasso possono essere correttamente conferiti in discarica oppure opportunamente riciclati.

	Marchatura CE		Dispositivo Medico
	Fabbricante		Lotto
	Consultare le istruzioni per l'uso		Data di Produzione
	Tenere lontano dalla luce del sole		Conservare in luogo asciutto
	Numero di catalogo		Codice UDI